

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Установка программы

Для установки программы «Лабораторная информационная система для научных и исследовательских работ» (ЛИС НиИР) необходимо предварительно установить платформу 1С версии не ниже 8.3.15.x. Распаковать архив Комплект поставки.zip и запустить установочный файл setup.exe (рис. 1)

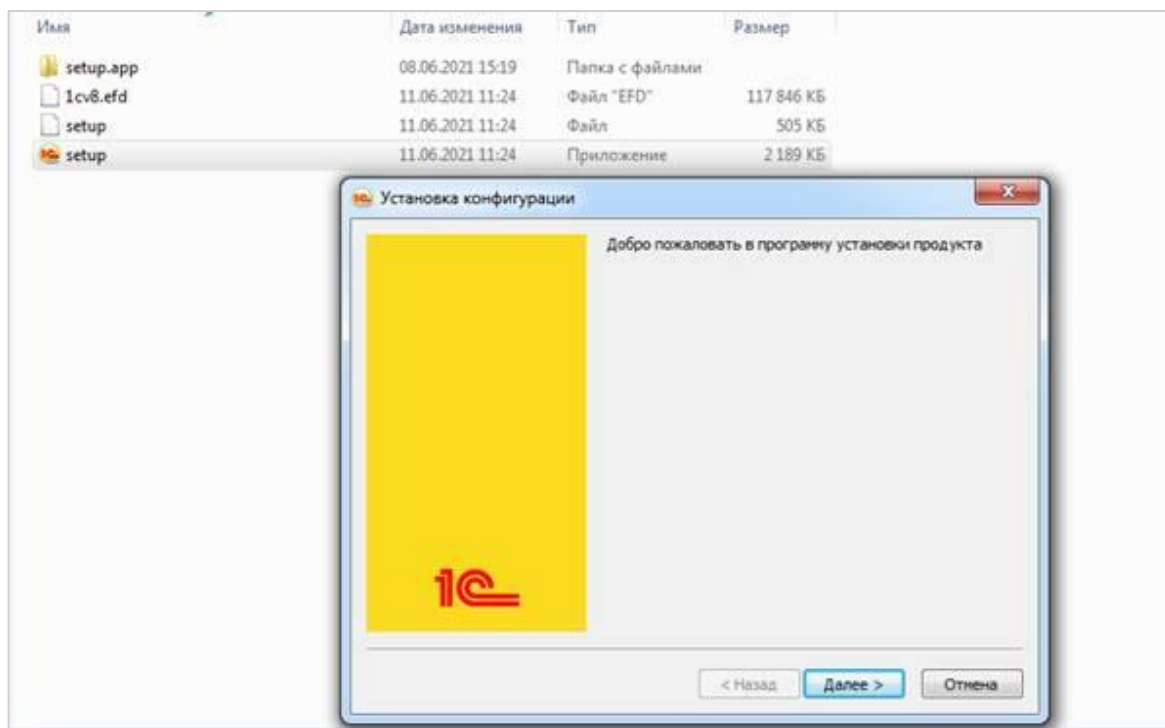


Рисунок 1 – Запуск инсталлятора программы ЛИС НиИР

Конфигурация ЛИС НиИР будет установлена в указанный каталог шаблонов (рис. 2).

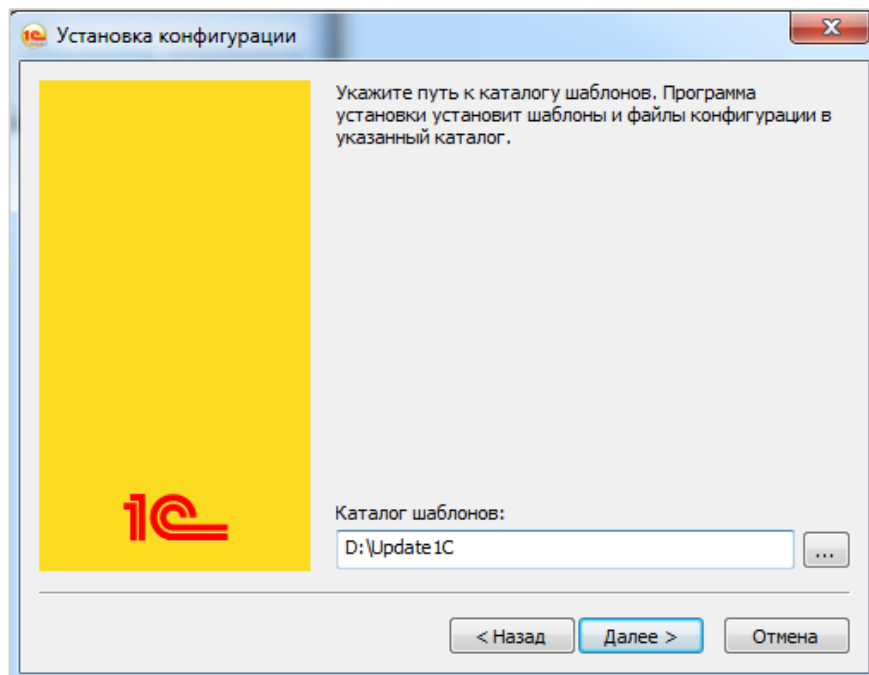


Рисунок 2 – Установка в каталог

Выполнить запуск 1С и добавить новую информационную базу (рис. 3, рис. 4)

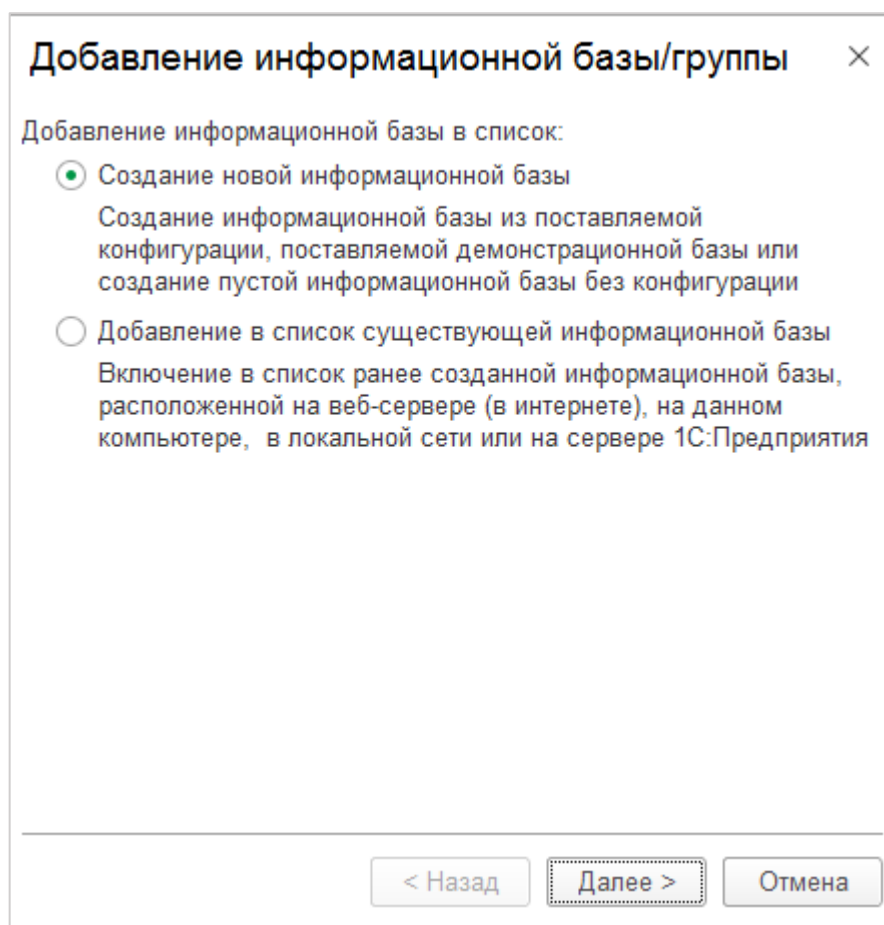


Рисунок 3 – Создание информационной базы

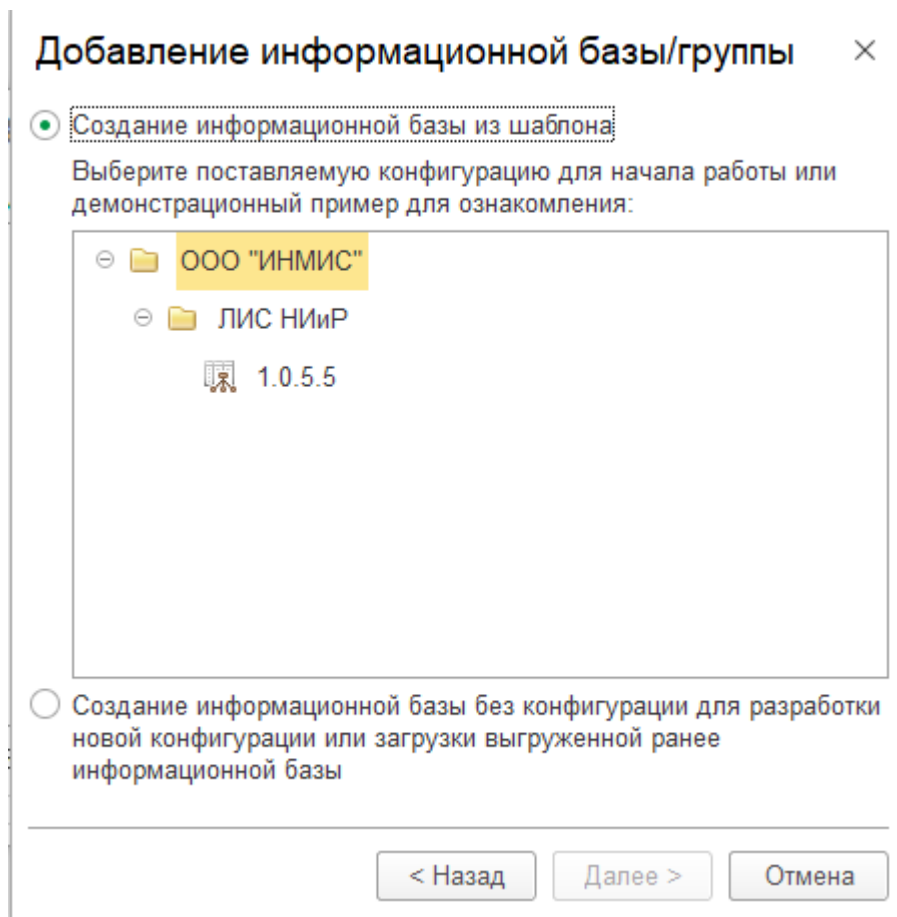


Рисунок 4 - Создание информационной базы из шаблона

Выбрать вариант установки – «Файловый» или «Клиент-серверный» (рис. 5). Для файлового необходимо выбрать каталог с будущей базой, для клиент-серверного указать параметры сервера и базы данных на сервере (рис. 6).

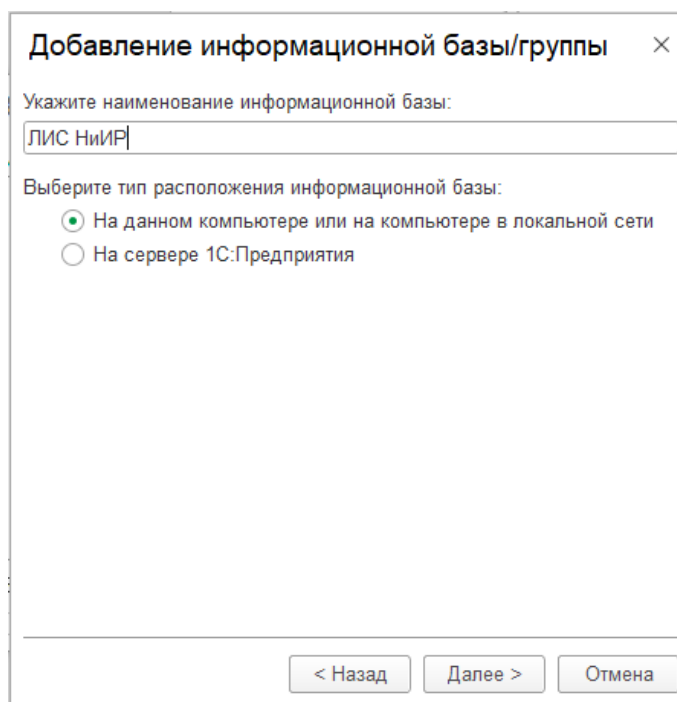


Рисунок 5 – Выбор варианта установки

Добавление информационной базы/группы ×

Укажите параметры информационной базы:

Кластер серверов 1С:Предприятия:

Имя информационной базы в кластере:

Защищенное соединение: Выключено ▾

Тип СУБД: ▾

Сервер баз данных:

Имя базы данных:

Пользователь базы данных:

Пароль пользователя:

Смещение дат: 0 ▾

Создать базу данных в случае ее отсутствия

Язык (Страна): русский (Россия) ▾

Установить блокировку регламентных заданий

< Назад
Далее >
Отмена

Рисунок 6 – Настройка клиент-серверного варианта установки

В параметрах запуска указать следующую информацию: вариант аутентификации – выбирать автоматически, основной режим запуска – выбирать автоматически. После всех настроек запустить информационную базу.